

home8

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide

Model No. WMD1201

What's inside:



1x Automatic
Medication Dispenser



6x Dosage Templates



1x Key



4x AA Battery

คู่มือการติดตั้ง WMD1201

All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems.


ขั้นตอนที่ 1: ประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณ

1. แกะอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมออก
2. จับคู่อุปกรณ์และ Security Shuttle ภายในรัศมี 1-10 ฟุต เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำงานได้ดี
3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ จากนั้นเสียบแบตเตอรี่เข้า



ขั้นตอนที่ 2: ใส่อุปกรณ์เพิ่ม

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Home8 และที่ปุ่มรายการฟังก์ชัน 「≡」 แล้วเลือก 「จัดการอุปกรณ์」
 2. กดปุ่มบวก (+) ข้างรายการเซนเซอร์ (Sensor List)
 3. สแกน QR โค้ดบนอุปกรณ์ตามคำอธิบายบนแอปพลิเคชัน
- หมายเหตุ: หากสแกนไม่สำเร็จ โปรแกรมจะให้กรอกซีเรียลนัมเบอร์(SN)ของอุปกรณ์

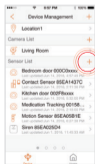

ขั้นตอนที่3: ทดสอบขอบเขตของอุปกรณ์

ก่อนติดตั้งเซนเซอร์ โปรดแน่ใจว่าเซนเซอร์อยู่ในรัศมี Security Shuttle ของสถานีฐานหรือไม่

1. นำอุปกรณ์ไปยังห้องที่ต้องการจะใช้
2. กดปุ่มลิต้าบนอุปกรณ์จ่ายยา เพื่อทดสอบอุปกรณ์ ไฟเขียวแสดงว่าอยู่ในรัศมีไฟแดงแสดงว่าไม่อยู่ในรัศมีที่ใช้งานได้

